
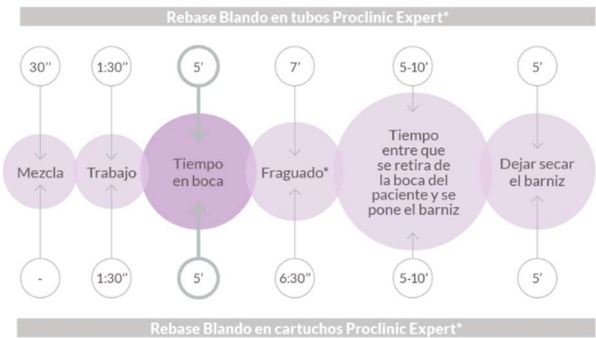


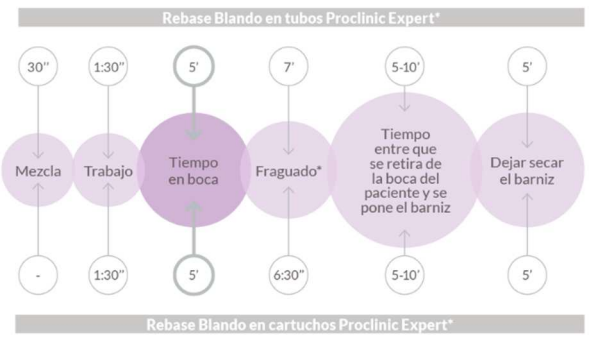




FICHA TÉCNICA

<p>RESINA REBASE BLANDO CARTUCHO MARCA: PROCLINIC EXPERT</p>																			
<p>REFERENCIAS</p> <p>41520: KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 7 puntas, 2 pipetas.</p> <p>41521: Reposición cartucho 50 ml</p>																			
<p>FABRICANTE / RESPONSABLE</p>	<p>DETAX GmbH & Co.KG Carl-Zeiss-Str. 4 D-76275 Ettlingen Germany</p>																		
<p>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</p>	<p>Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.</p>																		
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Material de rebase permanente en cartuchos, de silicona a blanda y de curado frío. -La consistencia tixotrópica de Rebase Blando Proclinic Expert facilita la aplicación y se mantiene en su posición una vez aplicado. -Fragua rápidamente en boca sin producir calor. -Se adhiere firmemente a todo tipo de acrílicos. Biocompatible, sin olor ni sabor y con alta estabilidad dimensional y de color. <p>Indicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material de rebase blando para prótesis completas y parciales, provisionales o definitivas. - Mejora el soporte y la comodidad gracias a su consistencia blanda. - Indicado para ampliar los bordes de la prótesis. - Indicado en casos de atrofia, ulceraciones, inflamaciones y rebases postoperatorios. 																		
<p>ESPECIFICACIONES</p>	 <p style="text-align: center;">Rebase Blando en tubos Proclinic Expert*</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>30"</td> <td>1:30"</td> <td>5'</td> <td>7'</td> <td>5-10'</td> <td>5'</td> </tr> <tr> <td>Mezcla</td> <td>Trabajo</td> <td>Tiempo en boca</td> <td>Fraguado*</td> <td>Tiempo entre que se retira de la boca del paciente y se pone el barniz</td> <td>Dejar secar el barniz</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1:30"</td> <td>5'</td> <td>6:30"</td> <td>5-10'</td> <td>5'</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Rebase Blando en cartuchos Proclinic Expert*</p> <p style="font-size: small;">* Tiempos para el rebase blando en tubos y en cartucho.</p>	30"	1:30"	5'	7'	5-10'	5'	Mezcla	Trabajo	Tiempo en boca	Fraguado*	Tiempo entre que se retira de la boca del paciente y se pone el barniz	Dejar secar el barniz	-	1:30"	5'	6:30"	5-10'	5'
30"	1:30"	5'	7'	5-10'	5'														
Mezcla	Trabajo	Tiempo en boca	Fraguado*	Tiempo entre que se retira de la boca del paciente y se pone el barniz	Dejar secar el barniz														
-	1:30"	5'	6:30"	5-10'	5'														

COMPOSICIÓN	<p>Contiene polidimetilsiloxano, parcialmente con grupos funcionales. Material de relleno y pigmento de color. Catalizador adicional: complejo orgánico de platino.</p>
PRESENTACIÓN	<p>1 cartucho de 50 ml + adhesivo de 5 ml + 2 botes de 6 ml de barniz (A+B) + 7 puntas mezcladoras + 2 pipetas.</p>
VIDA ÚTIL	<p>3 años</p>
FINALIDAD	<p>Material de rebase blando para prótesis completas y parciales, provisionales o definitivas.</p>
INSTRUCCIONES DE USO	<p>Ver instrucciones en el producto.</p>
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	<p>Proteger de la luz solar, almacenar a temperaturas de 15 y 25 °C.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

TECHNICAL DATA SHEET

RESIN REBASE SOFT CARTRIDGE BRAND: PROCLINIC EXPERT		
REFERENCES	<p>41520: KIT. 50 ml cartridge, 5 ml adhesive, 2 x 7 ml varnish (base + catalyst), 7 tips, 2 pipettes.</p> <p>41521: 50 ml cartridge replacement.</p>	
MANUFACTURER	<p>DETAX GmbH & Co.KG Carl-Zeiss-Str. 4 D-76275 Ettlingen Germany</p>	
CLASSIFICATION OF THE PRODUCT	<p>Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.</p>	
DESCRIPTION	<p>Characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cold cure soft silicone A silicone permanent relining material in cartridges. -The thixotropic consistency of Rebase Blando Proclinic Expert makes application easy and stays in position once applied. -Sets quickly in the mouth without producing heat. <p>Sticks firmly to all types of acrylics. Biocompatible, odorless and tasteless and with high dimensional and color stability.</p> <p>Indications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soft relining material for complete and partial dentures, provisional or definitive. - Improves support and comfort due to its soft consistency. - Indicated for enlarging the prosthesis edges. - Indicated in cases of atrophy, ulcerations, inflammations and postoperative relining. 	
SPECIFICACIONES	 <p>* Tiempos para el rebase blando en tubos y en cartucho.</p>	

COMPOSITION	Contains polydimethylsiloxane, partially with functional groups. Filler material and color pigment. Additional catalyst: organic platinum complex.
PACKAGING	1 cartridge of 50 ml + adhesive of 5 ml + 2 bottles of 6 ml of varnish (A+B) + 7 mixing tips + 2 pipettes.
SHELF LIFE	3 years
INTENDED USE	Soft relining material for full and partial dentures, provisional or definitive.
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Protect from sunlight, store at temperatures between 15 and 25 °C. <div style="text-align: right;">   </div>