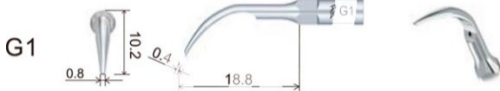


FICHA TÉCNICA

INSERT WOODPECKER PROFILAXIS ROSCA EMS/MECRON. G1		
REFERENCIAS	98808	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. Information Industrial Park Guilin National High-Tech Zone 541004, Guangxi-China.	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Los insertos para ultrasonidos Woodpecker-DTE son compatibles con los sistemas de rosca de las principales marcas de mangos piezoeléctricos. Características: • Compatible con EMS. • Punta específica para profilaxis curva aplanada. • Rosca de precisión homologadas según DIN. • Su superficie está tratada con técnicas especiales de pulido. • Pasan por 5 controles de calidad para asegurar unos bordes suaves sin ángulos ni rebabas.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable SUS420J2.	
INSTRUCCIONES DE USO SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco a 134° C. El número máximo de esterilizaciones para las puntas es de 300 veces.	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.