

initial[™] Zirconia Disk Multilayer Elite

La mejor elección para los más exigentes.



La mejor elección para los más exigentes.

Diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto entre alta resistencia y estética excepcional, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite es la elección ideal para restauraciones anteriores y posteriores.




ESTÉTICA SUPERIOR

Color natural y gradiente de translucidez para restauraciones anteriores y posteriores.



ALTA RESISTENCIA

Clasificada como Clase V según DIN EN ISO 6872 con un valor medio de > 1.100 MPa.

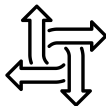

OMNI-FUNCIONAL

Versátil y adecuado para una amplia gama de indicaciones clínicas. Sinterización rápida o sinterización regular.


Gradiente natural

Impresionantemente natural: un gradiente sin fisuras desde cervical a incisal, tanto en color como en translucidez, que imita la estructura dental natural de la mejor manera posible.

Translucidez >49% Resistencia 800 MPa		5Y		INCISAL		20%
		4-5Y		CAPA INTERMEDIA 1		15%
		4-5Y		CAPA INTERMEDIA 2		15%
		4-5Y		CAPA INTERMEDIA 3		15%
Translucidez >45% Resistencia 1.150 MPa		4Y		CERVICAL		35%

Propiedades físicas

- Dióxido de circonio Tipo II Clase V DIN EN ISO 6871
- Resistencia a la flexión: valor medio típico ≥ 1.100 MPa
- Alto gradiente de translucidez de >45% a >49%.
- Sinterización rápida de coronas y puentes de hasta 3 unidades

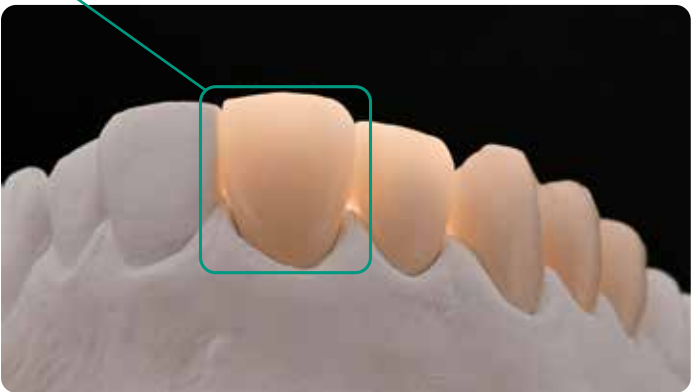

Hecho para la productividad

Se puede maximizar la productividad sin comprometer la calidad.

ESCANEAR Y DISEÑAR con Aadvia Lab Scan 3

Escáner con control gestual de alta precisión y funciones de escaneado inteligente



2D MAQUILLAJE INTERNO

con Initial Zirconia Coloring Liquid

Perfeccione con colores de efecto para conseguir la máxima sofisticación.

MICROESTRATIFICACIÓN con INITIAL IQ ONE SQIN

MAQUILLAJE 3D con initial iq lustre pastas one

Color y fluorescencia - ya sea para trabajos puramente monolíticos o con micro-cutback en combinación con IQ SQIN.



FORMA Y TEXTURA con INITIAL IQ SQIN

Vitalidad, textura natural y brillo dentro de una microcapa.



ESTRATIFICACIÓN CLÁSICA

con Initial Zr-FS Efectos ópticos

insuperables y gran estabilidad tras varias cocciones para estructuras con corte clásico.



CEMENTAR con FujiCEM Evolve

La elección preferida para el óxido de circonio, fácil de usar e ideal para márgenes yuxtagingivales o subgingivales.



initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

La mejor elección para los más exigentes.

Las ventajas de un vistazo

- Estética superior con un degradado combinado de color y translucidez.
- **Alta resistencia** en todas las capas, lo que la hace adecuada para una amplia gama de indicaciones.
- Limita el acabado deseado con una **estructura en el tono de color** adecuado.
- Sinergia óptima con Initial Zirconia Coloring Liquid y el concepto IQ ONE SQIN para una individualización de alta gama.
- Los 16 tonos en V y los 3 tipos de blanqueadores están disponibles en discos de 14, 16, 20 y 25 mm de grosor y 98,5 mm de diámetro.



Sinergias perfectas



Initial Zirconia Coloring Liquid



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info.spain@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/es-ES>