

Renfert

making work easy



MT premium

NOVEDAD Recortadora en húmedo

NOVEDAD MT premium

Recortadora en húmedo con luz de trabajo y sistema Aqua Stop

Recortado en húmedo con calidad superior: las sofisticadas peculiaridades perfeccionan el uso diario y hacen de MT premium una recortadora extraordinaria.

Ventajas

- Recorte en húmedo eficaz y preciso de modelos dentales de yeso.
- Trabajo sin fatiga gracias a la iluminación que lleva integrada.
- Reducción de costes y conservación de recursos gracias al sistema Aqua Stop.
- Rápida modificación del ángulo de la mesa de la recortadora gracias a un práctico mecanismo basculante (90°/98°).

Detalles

- Limpieza rápida y sencilla gracias a la retirada sin herramientas de la mesa de la recortadora, de la puerta y del tubo de rociado.
- Trabajo limpio y fluido gracias a una estanqueidad óptima.

Otros detalles

- Motor con potencia superior a la media para una excelente remoción de la superficie incluso con yesos duros.
- Guiado fácil de los modelos de yeso con ayuda de líneas de ángulo ranuradas en la mesa de la recortadora.
- Visión óptima hacia el modelo gracias a una inclinación del aparato de 10°.
- Un tubo de rociado óptimamente posicionado evita el atascamiento del disco de la recortadora mediante pulverización uniforme.



tool included



easy use



perfect view



Iluminación óptima de la zona de trabajo

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V 100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	1300 W (230 V) 1325 W (120 V)
Potencia del motor (P1)	1300 W
Potencia del motor (P2)	900 W
Número de revoluciones	2880–3400 rpm
Consumo de agua máx.	7 l/min
Presión de agua mín. / máx.	1–5 bar
Ø (Tubos de conexión para el tubo de desagüe)	36 mm
Ø (Disco recortador)	234 mm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	305 x 330 x 410 mm
Peso (sin disco)	~13,2 kg

Referencias

MT premium incl. disco de recorte Klettfix, 220-240 V	No. 18070000
MT premium incl. disco de recorte Marathon, 220-240 V	No. 18070500
MT premium incl. disco de recorte Klettfix, 100-120 V	No. 18071000
MT premium incl. disco de recorte Marathon, 100-120 V	No. 18071500

NOVEDAD ORTHO guide

Juego complementario de ortodoncia para MT premium o MT3



ORTHO guide hace de MT premium y MT3 unas recortadoras especiales para las necesidades de la ortodoncia.

Ventajas

- Recorte rápido y preciso, que tiene en cuenta todos los planos oclusales, de modelos de ortodoncia con plantilla intuitiva y mesa de recortadora especial.
- Mayor precisión y alineación óptima de la línea media del rafe gracias a la luz direccional (solo en MT premium).
- Rectificado preciso del plano de tubérculo del modelo maxilar superior.
- Producción de modelos maxilares, orientados con precisión tridimensional, considerando todos los planos oclusales.

Detalles

- Gracias al concepto de guiado especial, la plantilla no se instala fija en la unidad, por lo que puede retirarse fácilmente sin herramientas.
- Limpieza sencilla, rápida y sin herramientas de todos los componentes.
- Instrucciones paso a paso con modelos maxilares de mandíbula superior e inferior (indicados también para documentar el proceso).

Otros detalles

- El montaje posterior no requiere personal especializado y puede ser realizado sin dificultad por el propio usuario.



Recorte preciso, considerando todos los planos oclusales, con plantilla intuitiva

Características técnicas

Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	25 x 42 x 115 mm
Peso	~40 g
Láser clase	1

Referencias

ORTHO guide Set MT premium	No. 18070100
ORTHO guide Set MT3	No. 18080100

Más recortadoras

MT3

Recortadora en húmedo

incl. disco de recorte Klettfix, 220-240 V
No. 18080000

incl. disco de recorte Marathon, 220-240 V
No. 18080500

incl. disco de recorte Klettfix, 100-120 V
No. 18081000

incl. disco de recorte Marathon, 100-120 V
No. 18081500



MT plus

Recortadora en húmedo y en seco

incl. disco de recorte Klettfix, 220-230 V
No. 18030000

incl. disco de recorte Marathon, 220-230 V
No. 18030500



Discos de recorte

Klettfix MT plus

Disco de recorte en carburo de silicio y 2 granos



5 x Klettfix MT plus, (3 x grano 80, 2 x grano 120) + disco de soporte
No. 18031000

Klettfix MT3/MT premium

Disco de recorte en carburo de silicio y 2 granos



5 x Klettfix MT3/MT3 pro/MT premium, (3 x grano 80, 2 x grano 120) + disco de soporte
No. 18031001

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Paquete de reposición grano 80



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031100

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Paquete de reposición grano 120



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031200

Marathon MT plus


Disco de recorte parcialmente diamantado



Marathon MT plus
No. 18032000

Marathon MT3/MT premium

Disco de recorte parcialmente diamantado

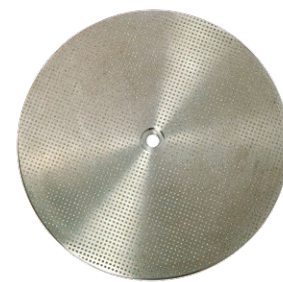

Marathon MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18032001

Infinity MT plus

Disco de recorte totalmente diamantado



Infinity MT plus
No. 18033000

Infinity MT3/MT premium

Disco de recorte totalmente diamantado



Infinity MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18033001